

naillift[®]





MANUEL UTILISATEUR


S'il vous plaît lire le mode d 'emploi

Utilisation de la Naillift

L'instrument est utilisé comme appareil et technique pour traiter les ongles incarnés. Avant de demander un plan de traitement, d'abord évaluer l'état de santé.

anamnèse

- Quelle est la cause du problème des ongles
- est l' entretien des ongles possible ou utile
- ongles / ongles anatomopathologiques / ongles sulcus
- médicaments

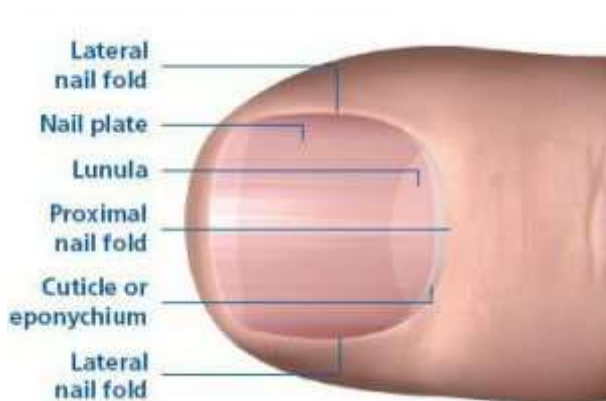

anamnèse

Dispositif



préparer

L'instrument est un appareil pour traiter les ongles incarnés / incarnés. Le Naillift possède 2 crochets pour soulever le clou de sa paroi de l'ongle. Le positionnement de ces crochets sur le côté latéral et médial du bord de l'ongle et le serrage de la vis sur le capuchon crée une force de traction, ce qui amène les côtés de clous à être tiré vers le haut.



procès- de levage

processus de levage

Le processus de levage doit avoir lieu en plusieurs étapes. Si vous souhaitez apporter un support ou d'un gel pour maintenir en permanence la position stimulée de l'ongle, nous vous recommandons de mettre en place un rendez-vous de suivi (le lendemain) avec le client afin que la plaque de l'ongle reste bien sec. Comme support, colpoline ou smig peut être appliqué de telle sorte que l'ongle maintient la position stimulée.



préparer

Avant d'utiliser le Naillift vous devez préparer l'ongle à l'avance. S'il vous plaît ne pas couper l'ongle encore, nettoyez le mur de l'ongle.



Faire tremper les ongles

tremper l'ongle

Il est important de faire tremper les ongles à l'avance avec un maturateur naillift. Appliquer beaucoup de naillift suintant à un tampon de cellulose et laissez ce tremper pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez également tremper leurs pieds dans un bain de pieds rempli d'eau tiède.



selle Naillift

Situé au milieu d'une selle Naillift. La selle est en différentes tailles pouvant être obtenue selon la forme de l'ongle. La selle exerce une pression sur l'ongle plaquer de manière sécurisée afin que vous les côtés de l'ongle peut

Selle Naillift

ascenseurs. Sur ce chemin, il n'y a aucune chance de l'apparition de onycholysis.



Crochets placés sous l'ongle

processus de levage

Les crochets sont placés sous le côté de l'ongle, après quoi vous abaissez la selle en tournant doucement et sans bruit de la roue. Dans ce processus, toujours rester en contact avec votre client.



tourner doucement la roue

brushing utilisant de l'air froid

Le clou doit être brushing avec de l'air froid dans environ 5 minutes, ce qui permet l'ongle de s'adapter à sa nouvelle position après le retrait du Naillift, vous devez l'ongle humide.



Brushing



procès- de levage



Supports

Vous pouvez utiliser toute technique de support. Assurez-vous que l'ongle est sec. Nous recommandons un rendez-vous de suivi (le lendemain) avec le client afin que la plaque de l'ongle se correctement séché. Comme support, colpoline ou smig peut être appliqué de telle sorte que l'ongle maintient la position stimulée.



colpoline ou smig

Après le traitement, il est recommandé de donner les conseils client par écrit et que le client planifie un rendez - vous de suivi après une semaine pour un check-up.

Catégorie: Utilisateur Manuel

La description (0)

Description du produit

Quels clous peuvent être traités avec le Naillift:



Pincer ongles / clou
alambiquée

congenital clou trompette / clou alambiquée

deux utile comme technique et un outil. Vous soulevez le clou pour qu'il / elle est sans pression et placer un support pour maintenir la position stimulée. vous pouvez faire un plan de traitement pour maintenir la position tous les 3 mois.



clou trompette / clou
alambiquée

obtenu unguis tegularis / unguis convolutus

deux utiles en tant que technique et un outil. Vous soulevez le clou pour qu'il / elle est sans pression et placer un support pour maintenir la position stimulée.



ongles incarnés

ongles incarnés

En fonction de la position de l'ongle incarné le Nailift peut être utilisé comme une technologie ou comme un outil pour mieux accéder à l'ongle sulcus. Soulever les bords des ongles latéral et médial crée plus d'espace dans le sillon, ce qui simplifie également le nettoyage.



ongles incarnés

Nail Incarnés

Si le client a été renvoyée par le médecin pour subir une pédicure médicale, vous pouvez créer un plan de traitement en collaboration avec le médecin. Laissez le médecin prescrire un antibiotique, le médecin peut toucher l'inflammation avant le traitement et vous pouvez soulever et dépressuriser l'ongle afin que favorise la guérison et le clou est directement soulagé de la pression.



Maïs dans l'ongle sulcus

Le Naillift est facile à manipuler comme un outil pour un meilleur accès au maïs dans l'ongle sulcus.

Avertissements

- Si le clou a été trempé avant le traitement, il doit être séché très soigneusement avant de placer un support à ongles.
- Le serrage de la Naillift crée une puissance de traction forcée sur les bords des ongles médial et latéral. Un serrage excessif et / ou un serrage excessif du Naillift peut être douloureux pour le client.
- Les crochets aux côtés de la Naillift sont minces pour atteindre facilement sous les bords des ongles. Cela pose un risque de formation de la plaie dans le sillon.
- Soulevant les bords des ongles avec force mécanique crée un risque de développer onycholysis.
- En utilisant le Naillift, la position de l'ongle est artificiellement ajustée. Ceci doit être pris en compte lors du placement d'un support. Si un support est placé sur un clou sans utiliser le Naillift, la force de traction du support est adaptée à la position de l'ongle. Lorsque vous utilisez le Naillift, cette position changera temporairement. Cependant, un certain temps après le retrait de la Naillift le clou reprendra sa position habituelle.
- Le traitement avec le Naillift est symptomatique. Avant de commencer un traitement, doivent vérifier les structures sous-jacentes de l'orteil et le pied, parce

que ceux-ci peuvent être la cause de la situation problématique. Les chaussures doivent également être contrôlés de manière approfondie.

- avec précaution d'utiliser le Naillift chez les patients atteints de risque, des inflammations et / ou blessures du WALL2 des ongles et / ou une plaque à ongles mince ou fragile. 2. Un ongle incarné est toujours accompagnée d'une inflammation et une blessure. l'utilisation incompétente du Naillift peut entraîner des complications, telles que onycholysis. Il est donc conseillé de suivre une formation où plusieurs problèmes d'ongles de la vie réelle seront traités, en utilisant le Naillift. Outre la formation, il est important de suivre les directives ci-dessus lors de l'utilisation du Naillift.
- 1. diabète sucré, les maladies rhumatismales, les maladies vasculaires, les maladies neurologiques, le cancer, les maladies dermatologiques.

Produits connexes



Naillift vidéo

LIRE LA SUITE

© 2017 Naillift.com. Tous les droits sont réservés.

QAppuyez